

# HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE™

CORONARIO

Guía de angioplastia - Workhorse


## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Núcleo proximal de DURASTEEL con recubrimiento de PTFE + recubrimiento hidrofóbico SMOOTHGLIDE™
- Núcleo distal de ELASTINITE™ Nitinol que proporciona durabilidad, manteniendo buen balance entre soporte y flexibilidad. Recubrimiento hidrofílico completo excepto 1, 5 cm, para mantener lubricidad de la guía hasta en los casos más largos.
- Núcleo distal con diseño de Pulido parabólico RESPONSEASE, que proporciona una excelente navegabilidad y una respuesta 1:1 al torque.
- Marcador de oro opcional a 4,5 cm de la punta.
- Diseño de alma hasta la punta (Core-to-tip) con punta de Nitinol, para una durabilidad excelente y manejo preciso.

RECUBRIMIENTO  
POLIMÉRICO  
(PTFE) +  
RECUBRIMIENTO  
HIDROFÓBICO  
(SMOOTHGLIDE™)

ELASTINITE™  
NITINOL  
para mayor  
durabilidad de la guía

COILS RADIOPACOS  
de 3 cm  
para una mayor  
visibilidad de la guía

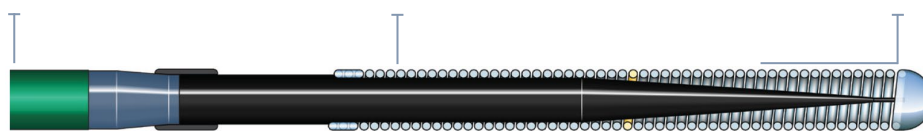

RECUBRIMIENTO  
HIDROFÍLICO  
para la lubricidad de  
la guía

MARCADOR  
DE ORO  
para un  
posicionamiento  
preciso

ALMA HASTA LA  
PUNTA  
para una durabilidad  
excelente y  
navegabilidad precisa

## INDICACIONES SEGÚN IFU

Guía destinada para facilitar la colocación de catéteres de dilatación con balón durante la Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea (ACTP) y la Angioplastia Transluminal Percutánea (ATP).

La información contenida en este documento es para DISTRIBUCIÓN en América Latina, excepto Perú, México y Brasil. Confirme el estado regulatorio del dispositivo en su país.

©2023 Abbott. Todos los derechos reservados. MAT-2305872 v1.0



**Abbott**

# HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE™

CORONARIO

Guía de angioplastia - Workhorse

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE™	
Longitudes disponibles	190 cm y 300 cm	General
Compatible con DOC™ Extension	Sí (solo 190 cm)	
Diámetro de la guía	0.014" (0.36 mm)	
Recubrimiento Proximal	Politetrafluoroetileno (PTFE) + SMOOTHGLIDE (Hidrofóbico)	
Longitud del Recubrimiento Proximal	PTFE: Longitud de 190 cm: 137.5 cm Longitud de 300 cm: 248.5 cm	
	SMOOTHGLIDE™: Longitud de 190cm: 134 cm Longitud de 300 cm: 244 cm	
Recubrimiento Distal	PVP K-90 (Hidrofilico)	
Longitud del Recubrimiento Distal	39.5 cm +/- 1 cm (excluyendo 1.5 cm de punta)	
Recubrimiento Polimérico	Sí	
Respuesta al Torque	1:1	
Material del Núcleo Proximal	Acero Inoxidable	Núcleo
Material del Núcleo Distal	ELASTINITE™ Nitinol	
Conicidad del Núcleo Distal	Larga	
Material Coils Distales	Acero Inoxidable	
Longitud Coils Distales	3.0 cm – 3.2 cm	
Localización marcadores proximales	Braquial: 90 cm +/- 2 cm Femoral: 100 cm +/- 2 cm	Punta
Diseño de la Punta	Alma hasta la punta	
Forma de la Punta	Recta En "J"	
Material de la Punta	Acero Inoxidable	
Material de los Coils de la Punta	Aleación de Platino y Níquel (radiopaco)	
Longitud Coils Radiopacos de la Punta	3.0 cm – 3.2 cm	
Gramaje de la Punta	0.8 gr	
Poder de penetración	-	Uniones
Longitud Uniones	Distal: 0.5 – 1.0 mm Medial: 0.5 – 1.5 mm Proximal: 1.0 – 2.0 mm	

La información contenida en este documento es para DISTRIBUCIÓN en América Latina, excepto Perú, México y Brasil. Confirme el estado regulatorio del dispositivo en su país.

©2023 Abbott. Todos los derechos reservados. MAT-2305872 v1.0



# HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE™


CORONARIO

Guía de angioplastia - Workhorse

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE™	
Método de esterilización	Radiación ionizante (E-Beam)	Empaquetado
Recomendaciones de almacenamiento	Fresco, oscuro y seco	
Látex	No	
Unidades por caja	5 unidades	
Mínimo unidades venta	1 caja (5 unidades)	
Vida útil (desde la esterilización)	24 meses	

## CURVA DE SOPORTE

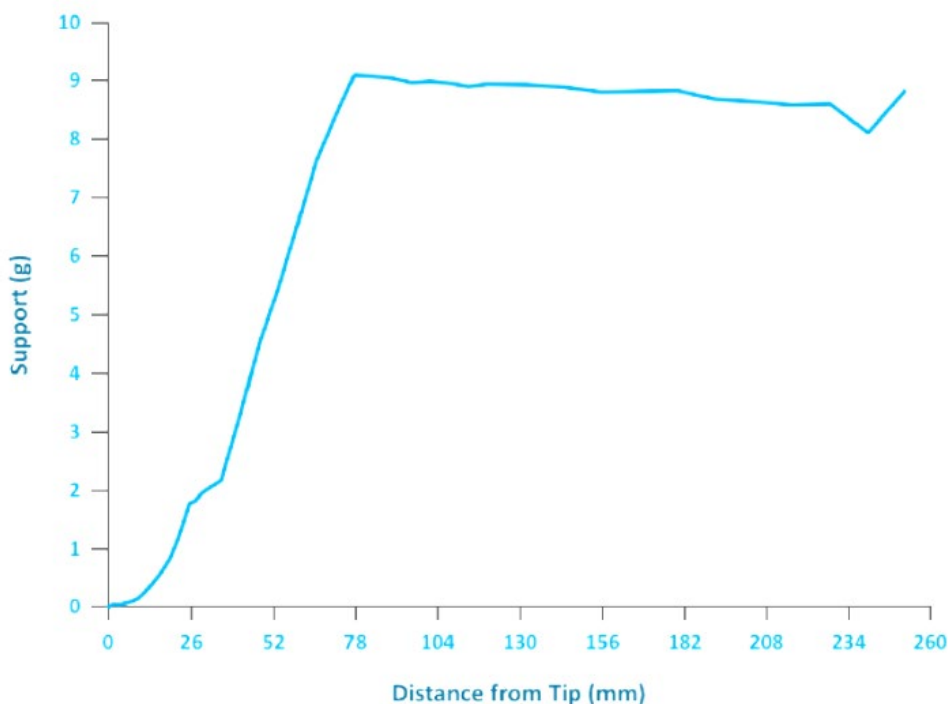

La información contenida en este documento es para DISTRIBUCIÓN en América Latina, excepto Perú, México y Brasil. Confirme el estado regulatorio del dispositivo en su país.

©2023 Abbott. Todos los derechos reservados. MAT-2305872 v1.0



# HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE™

CORONARIO

Guía de angioplastia - Workhorse

## REFERENCIAS DE VENTA

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE™ GUIDEWIRE							
Referencia	Diámetro de la guía	Longitud	Longitud Coils radiopacos	Forma de la punta	Marcador Oro	DOC™ Extension	Recubrimiento Distal
1011880	0.014"	190 cm	3 cm	Recta	Sí	Sí	Hidrofílico
1011880J	0.014"	190 cm	3 cm	J	Sí	Sí	Hidrofílico
1011881	0.014"	300 cm	3 cm	Recta	Sí	No	Hidrofílico
1011881J	0.014"	300 cm	3 cm	J	Sí	No	Hidrofílico
1011882	0.014"	190 cm	3 cm	Recta	No	Sí	Hidrofílico
1011882J	0.014"	190 cm	3 cm	J	No	Sí	Hidrofílico
1011883	0.014"	300 cm	3 cm	Recta	No	No	Hidrofílico
1011883J	0.014"	300 cm	3 cm	J	No	No	Hidrofílico

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Fabricante	Abbott Vascular con domicilio en estados unidos
Clasificación del riesgo	III
Dispositivo Implantable? (si/no)	No

Precaución: Este producto está diseñado para ser utilizado por o bajo la dirección de un médico. Antes de su uso, es importante leer detenidamente las Instrucciones de Uso de este dispositivo contenidas en el empaque del producto para información más detallada sobre las Indicaciones, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones y Complicaciones Potenciales asociadas al uso de este dispositivo. Este material está destinado solamente para uso por profesionales de la salud.

La información contenida en este documento es para DISTRIBUCIÓN en América Latina, excepto Perú, México y Brasil. Confirme el estado regulatorio del dispositivo en su país.

Todos los dibujos son solo representaciones artísticas y no deben considerarse como dibujos de ingeniería o fotografías. Fotografías en archivo de Abbott. Datos archivados en Abbott.

Abbott Vascular CALA  
Rua Michigan 735, Sao Paulo, Brasil. 04566-905  
™ indica una marca registrada del Grupo de Empresas de Abbott.  
©2023 Abbott. Todos los derechos reservados. MAT-2305872 v1.0

