
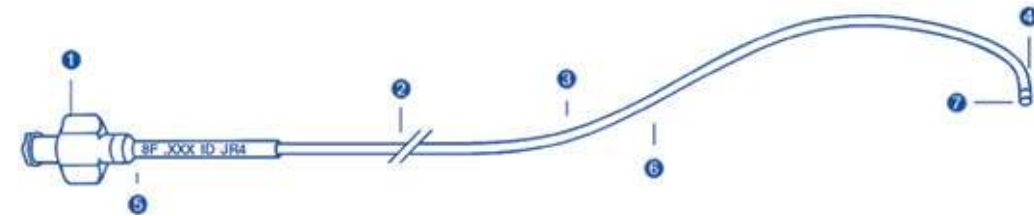


# Catéteres Guía

Información General ADROIT™

## ADROIT™ Catéteres Guía


- 1 Revestimiento Interno de PTFE (teflon)
- 2 Lumen Interno .072" (6F) y .058" (5F)
- 3 Trenzado de acero inoxidable

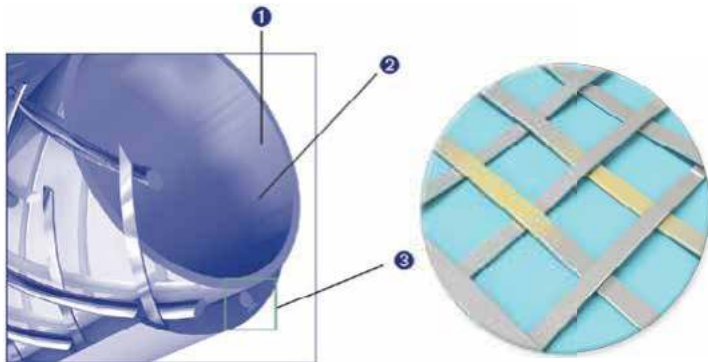

- 1 Hub
- 2 Lumen interno con Revestimiento de PTFE (teflon)
- 3 Cuerpo en acero inoxidable con alambre trenzado para respuesta a torque de 1:1
- 4 Sección de transición flexible
- 5 Tamaño French del catéter, diámetro interno (pulgadas) y forma de l punta se imprimen en la abrazadera de tensión
- 6 Revestimiento superior de nylon
- 7 Punta radiopaca suave para canulación segura del vaso



6F .072" GC

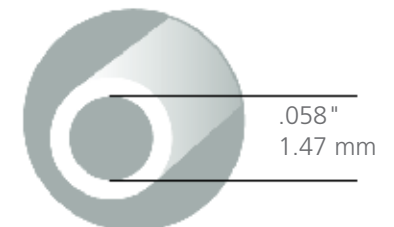

5F .058" GC

### Longitud:

- Diámetro Externo - OD: 6F
- Diámetro Interno (ID): 0.072"
- Trenzado en acero inoxidable
- Revestimiento interno: PTFE
- Cubierta Externa: Azul
- Color Punta: Amarillo
- Longitud de la punta: 5mm y 16mm

### Longitud:

- Diámetro Externo - OD: 5F
- Diámetro Interno (ID): 0.058"
- Trenzado en acero inoxidable
- Revestimiento interno: PTFE
- Cubierta Externa: Azul
- Color Punta: Amarillo
- Longitud de la punta: 5mm

# Catéteres Guía

## Técnica de Judkins en la Coronaria Izquierda - ADROIT™



Todos los catéteres son 100 cm, excepto cuando se indique.


### JUDKINS IZQUIERDO

			6F	5F
	JL 3	Judkins Izquierdo 3	672-000-00	558-000-00
	JL 3.5	Judkins Izquierdo 3.5	672-002-00	558-002-00
	JL 3.5 ST	Judkins Izquierdo 3.5, punta corta	672-012-00	
	JL 3.5 SH	Judkins Izquierdo 3.5, 2 agujeros laterales	672-003-00	
	JL 4 (90 cm)	Judkins Izquierdo 4	672-004-90	
	JL 4	Judkins Izquierdo 4	672-004-00	558-004-00
	JL 4 ST	Judkins Izquierdo 4, punta corta	672-014-00	
	JL 4 SH	Judkins Izquierdo 4, 2 agujeros laterales	672-005-00	
	JL 4 (125 cm)	Judkins Izquierdo 4	672-040-25	
	JL 4.5	Judkins Izquierdo 4.5	672-006-00	558-006-00
	JL 4.5 ST	Judkins Izquierdo 4.5, punta corta	672-016-00	
	JL 5	Judkins Izquierdo 5	672-008-00	558-008-00
	JL 6	Judkins Izquierdo 6	672-010-00	



### JUDKINS CURVED IZQUIERDO

			6F	5F
	JCL 3.5	Judkins Curved Izquierdo 3.5	672-026-00	558-026-00
	JCL 3.5 SH	Judkins Curved Izquierdo 3.5, 2 agujeros laterales	672-027-00	
	JCL 4	Judkins Curved Izquierdo 4	672-028-00	

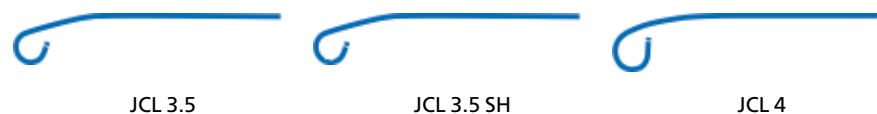

SH: Agujeros Laterales  
ST: Punta Corta


# Catéteres Guía

## Técnica de Judkins en la Coronaria Derecha - ADROIT™




### JUDKINS Derecha

			6F	5F
	JR 3.5	Judkins Derecha 3.5	672-080-00	558-080-00
	JR 3.5 SH	Judkins Derecha 3.5, 2 agujeros laterales	672-081-00	
	JR 4 (90 cm)	Judkins Derecha 4	672-082-90	
	JR 4	Judkins Derecha 4	672-082-00	558-082-00
	JR 4 ST	Judkins Derecha 4 Punta corta	672-090-00	
	JR 4 SH	Judkins Derecha 4, 2 agujeros laterales	672-083-00	
	JR4 (125 cm)	Judkins Derecha 4	672-082-25	
	JR4 LBT	Judkins Derecha 4 LONG BRITE TIP	672-082-0L	
	JR 5	Judkins Derecha 5	672-084-00	558-084-00

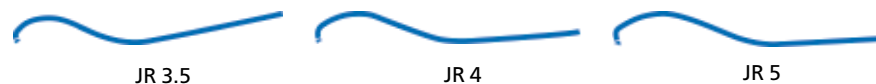

### JUDKINS CURVED Derecha

			6F	5F
	JCR 4	Judkins Curved Derecha 4	672-098-00	

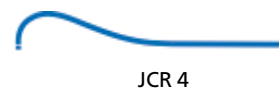

SH: Agujeros Laterales  
ST: Punta corta

# Catéteres Guía

Extra Back-Up en la Coronaria Izquierda - ADROIT™



## EXTRA BACK-UP

			6F	5F
	XB 2	Extra Back-Up 2	672-464-00	
	XB 2.5	Extra Back-up 2.5	672-465-00	
	XB 2.75	Extra Back-up 2.75	672-730-00	
	XB 3	Extra Back-Up 3	672-052-00	558-052-00
	XB 3.25	Extra Back-up 3.25	672-400-00	558-400-00
	XB 3 SH	Extra Back-Up 3, 2 agujeros laterales	672-053-00	
	XB 3.5 (125 cm)	Extra Back-up 3.5	672-054-25	
	XB 3.5 (90 cm)	Extra Back-Up 3.5, 90 cm	672-054-90	
	XB 3.5	Extra Back-Up 3.5	672-054-00	558-054-00
	XB 3.5 SH	Extra Back-Up 3.5, 2 agujeros laterales	672-055-00	
	XB 3.5 LBT	Extra Back-Up 3.5 LONG BRITE TIP	672-054-0L	
	XB 4	Extra Back-Up 4	672-056-00	558-056-00
	XB 4 SH	Extra Back-Up 4, 2 agujeros laterales	672-057-00	
	XB 4.5	Extra Back-Up 4.5	672-058-00	558-058-00
	XB 4.5 SH	Extra Back-Up 4.5, 2 agujeros laterales	672-059-00	



XB 2



XB 2.5



XB 2.75



XB 3



XB 3.25



XB 3.5



XB 4



XB 4.5