

TRAPEASE™ Filtro de Vena Cava
Permanente


TRAPEASE™ Filtro de Vena Cava Permanente ofrece una solución que resultó ser eficaz y segura para el uso a largo plazo.

Principales Características

- Construcción de Nitinol
- Proyecto de jaula cerrada
- Bajo Perfil - Introdutor de 6F
- Diámetro máximo de la Vena Cava de 30 mm
- Estructuras Laterales largas para garantizar la autocentralización
- Implantación por vía Femoral y Yugular
- Barbas de fijación craneal y caudal opuestas para reducir la migración

Composición del Kit de Introducción

- Filtro TRAPEASE™ mantenido en cartucho de entrega
- Obturador
- Introdutor BRITE TIP™
- Dilatador Angiográfico
- Información para Pacientes

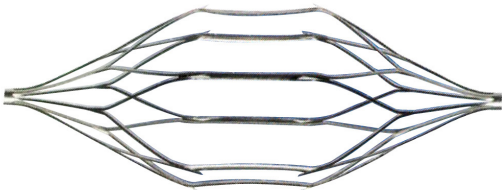

Descripción	Sitio de Acceso	Código del Producto
TRAPEASE™ Filtro de Vena Cava Temporal y Kit de Introducción (55 cm)	Yugular, Femoral	466P306A