

Physio II

Anillo De Anuloplastia
Carpentier - Edwards




Reparación sin límites.

Inventado por Alain F. Carpentier, MD, PhD y David H. Adams, MD



Edwards

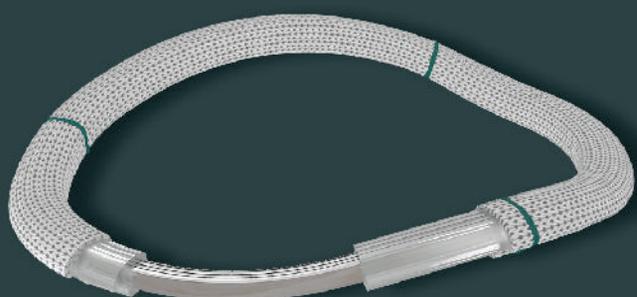

Un legado de confianza

- Diseñado por cirujanos para mejorar la experiencia de la implantación, incluyendo el manejo de las suturas, la colocación del anillo y la evaluación de la reparación.
- Ofrece a los cirujanos la seguridad de un diseño probado basado en 40 años de experiencia en la reconstrucción de la valvular.¹
- Una estructura central que proporciona flexibilidad selectiva, con rigidez en la porción anterior para moldeamiento y flexibilidad en la porción posterior para preservación del movimiento cardíaco.

Facilidad para cada implante.



Soporte angulado




Mejora la visualización y la línea de visión de la válvula

Retirada con un sólo corte

Requiere sólo un corte para retirar el soporte

Optimización global de la forma

Es la evolución de la forma D nativa a una forma más circular para adaptarse a los cambios patológicos en las dimensiones anulares mitrales.

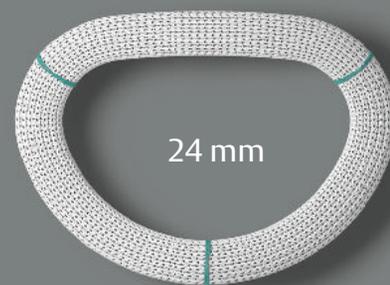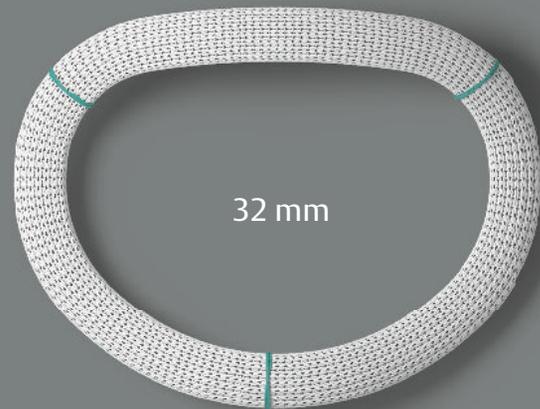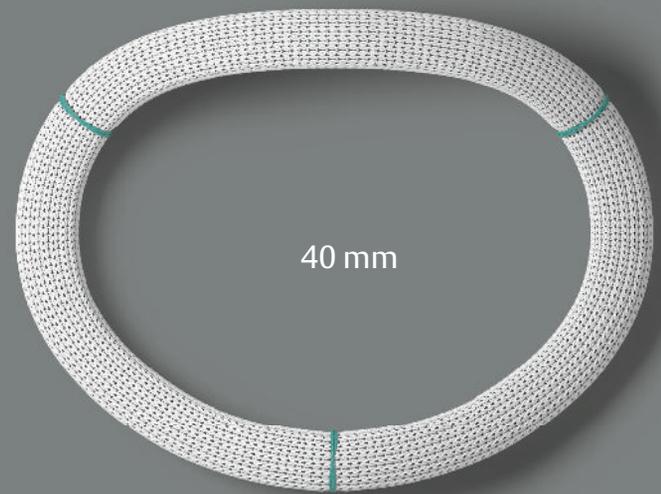

Zona de sutura identificada

Ofrece una mejora del 40% en el margen de sutura*

Marcadores anatómicos

Indican las comisuras anterior y posterior y el centro de la porción posterior del anillo

*Comparado con el Anillo Carpentier-Edwards Physio.



Anillo de anuloplastia Carpentier-Edwards Physio II

Descripción del modelo	Detalle	Número de modelo
Anillo de Anuloplastia Carpentier-Edwards Physio II	Tamaños 24 mm - 40 mm	5200
Accesorios de Anuloplastia Carpentier-Edwards Physio II	Set completo	1252
Mango	Reutilizable	1150
Mango de longitud extendida	Reutilizable	1151

El compromiso de Physio

Con el respaldo de la confianza de más de 250 000 paciente-años de experiencia, el compromiso de Physio de una anuloplastia de remodelación con flexibilidad selectiva prolonga la promesa de innovación significativa para las válvulas mitral y tricúspide.²⁻⁸

Referencias:

1. Based on the first remodeling ring annuloplasty performed by Prof. Carpentier in 1968. See Carpentier A. La valvuloplastie reconstitutive. Une nouvelle technique de valvuloplastie mitrale. Presse Med. 1969; 77:251-3.
2. Datos de archivo.
3. Vohra HA, Whistance RN, Bezuska L, Livesey SA. Initial experience of mitral valve repair using the Carpentier-Edwards Physio II annuloplasty ring. Eur J Cardiothorac Surg. 2010. Nov 22.
4. Accola KD, Scott ML, Thompson PA, Palmer CJ 3rd, Sand ME, Ebra G. Midterm outcomes using the Physio Ring in mitral valve reconstruction: experience in 492 patients. Ann Thorac Surg. 2005 Apr;79(4):1276-83; discussion 1276-83.
5. Fasol R, Lakew F, Wetter S. Mitral repair in patients with a ruptured papillary muscle. Am Heart J. 2000 Mar;139(3):549-54.
6. Carpentier AF, Lessana A, Relland JY, Belli E, Mihaileanu S, Berrebi AJ, Palsky E, Loulmet DF. The "Physio-Ring": an advanced concept in mitral valve annuloplasty. Ann Thorac Surg. 1995 Nov;60(5):1177-85; discussion 1185-6.
7. Seeburger J, Borger MA, Falk V, Kuntze T, Czesla M, Walther T, Doll N, Mohr FW. Minimally invasive mitral valve repair for MR. Eur J Cardiothorac Surg. 2008 Oct;34(4):760-5.
8. Braun J, van de Veire NR, Klautz RJ, Versteegh MI, Holman ER, Westenberg JJ, Boersma E, Van der Wall EE, Bax JJ, Dion RA. Restrictive mitral annuloplasty cures ischemic mitral regurgitation and heart failure. Ann Thorac Surg. 2008 Feb;85(2):430-6.

Precaución: La ley federal (Estados Unidos) restringe la venta de este dispositivo exclusivamente a médicos o bajo prescripción médica. Consulte las instrucciones de uso para obtener toda la información de prescripción, incluyendo indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y eventos adversos.

Producto Médico de uso exclusivo profesional y de venta exclusiva a Instituciones Sanitarias y Profesionales de la Salud. EDWARDS INTUITY Elite sistema de válvula Autorizado en Colombia por INVIMA - Registro sanitario 2007DM-0001152R1; Autorizado en Argentina por ANMAT - Registro sanitario PM-340-143; Autorizado en Costa Rica - Registro sanitario 4128-EMB-7776; Autorizado en Panama - Criterio Técnico C.S.S. MQ-3699-01-10; Autorizado en Mexico por la COFEPRIS - Registro sanitario 1364C2012SSA y Aviso de publicidad YYYYYYYYYYYYYY.

Edwards, Edwards Lifesciences, el logotipo de la E estilizada, Carpentier-Edwards Physio y Carpentier-Edwards Physio II son marcas registradas de Edwards Lifesciences Corporation.

© 2017 Edwards Lifesciences Corporation. Todos los derechos reservados. DOC-0077831_Rev. A

Progreso con Confianza

Edwards Lifesciences | edwards.com | sepamas@edwards.com
Colombia • Carrera 7 # 114 33 • Edificio Scotiabank Oficina 505 • Bogotá • Cundinamarca
México • Av. Insurgentes Sur, 1863 • 401 • Col. Guadalupe Inn; Deleg. Alvaro Obregón • Ciudad de México
Brasil | EUA | Colombia | Suiza | Japón | China



Edwards